

## INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE PORTADOR DE TERAPIA DE PRESION NEGATIVA

### 1.Introducción :

La terapia de presión negativa es un tratamiento que favorece la cicatrización de las heridas. Favorece la formación de tejido nuevo y ayuda a eliminar el exudado de las heridas. Se trata de una terapia que puede usarse en el hospital y en el domicilio.




### 2.Consejos y Recomendaciones

- Puede dar paseos, evitando actividades físicas extenuantes.
- Puede ducharse evitando el chorro directo del agua en el apósito. Queda prohibido sumergirla en el agua. Se recomienda desconectar previamente la terapia de la luz y protegerla/alejarla del agua.
- A la hora de dormir debe tener en cuenta, que debe colocar la unidad de terapia de forma que los tubos no se doblen ni se aplasten.




- Para saber si el equipo está en funcionamiento confirme que giren las aspas que me muestran en la siguiente imagen:
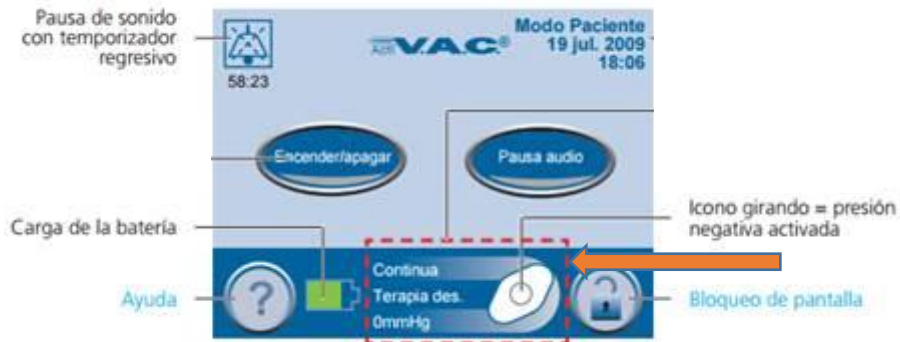
#### Pantalla de inicio del Modo Paciente




- La máquina debe de estar siempre dentro de la funda de transporte y en posición vertical.
- No apague la unidad de terapia, salvo en los casos siguientes:
  - Por orden del personal sanitario.
  - Sufre una hemorragia.
  - Experimenta una reacción alérgica.
- Sólo el personal sanitario, debe aplicar o retirar el apósito.
- No modifique la unidad de terapia ni el apósito.

### 3. Signos y Síntomas de Alerta ¿Qué hacer ?

TIPO DE ALARMA		
Contenedor Lleno		<p>Si el contenedor no está lleno pulse <i>Restablecer</i>. Compruebe que las pinzas de los tubos estén abiertas y que los tubos no estén doblados.</p> <p>Si el contenedor está lleno, cambie el contenedor si le han explicado cómo hacerlo y pulse <i>Restablecer</i> para volver a la pantalla de inicio.</p>
Tubo Obstruido		<p>Compruebe que las pinzas de los tubos estén abiertas y que los tubos no estén doblados. Pulse <i>Restablecer</i> para volver a la pantalla de inicio.</p>
Fuga de Aire en el tubo y/o Apósito		<p>Pase la mano con suavidad alrededor de la lámina para comprobar si hay fugas. De encontrarlas, coloque otro trozo de lámina encima si le han explicado cómo hacerlo. Compruebe si el conector está correctamente cerrado y el contenedor encajado. Pulse <i>Restablecer</i> para volver a la pantalla de inicio.</p>

### Terapia Desactivada

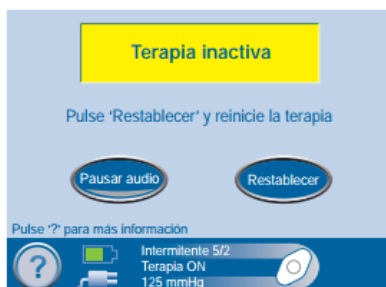

Pulse *Restablecer* para volver a la pantalla de inicio.

Reinicie la terapia pulsando ON/OFF.

### Batería Baja



Conecte el equipo a la red eléctrica para recargar la batería. A continuación, pulse *Restablecer*.

- Debe contactar con el personal sanitario si tiene cualquier duda y siempre en los siguientes supuestos:
  - Si duda sobre si la terapia está encendida.
  - Si no le han explicado cómo resolverlo cuando:
    - El contenedor cuando esté lleno.
    - Si cree que hay fugas de aire.
  - Si presenta hemorragia o sangrado abundante
  - Si nota rojez, hinchazón, calor, presenta sarpullido o sufre picores.
  - Si presenta dolor en el área del apósito o tiene fiebre.

Teléfono de contacto: \_\_\_\_\_

**4. Parametros de su terapia:**

Presión: \_\_\_\_\_ mm Hg

Intensidad: baja      media      alta

Continua      Intemitante.